

カインティック比色法 エンドスペシーES-50M セット 検量線例

【検量線範囲:0.1, 0.025, 0.00625EU/mL】

■機器情報

測定機器: Wellreader Advance

■試薬情報

試薬: エンドスペシーES-50M セット


溶解液: 緩衝液

標準品: JPRSE

■相関係数

r= 1.000

検量線情報

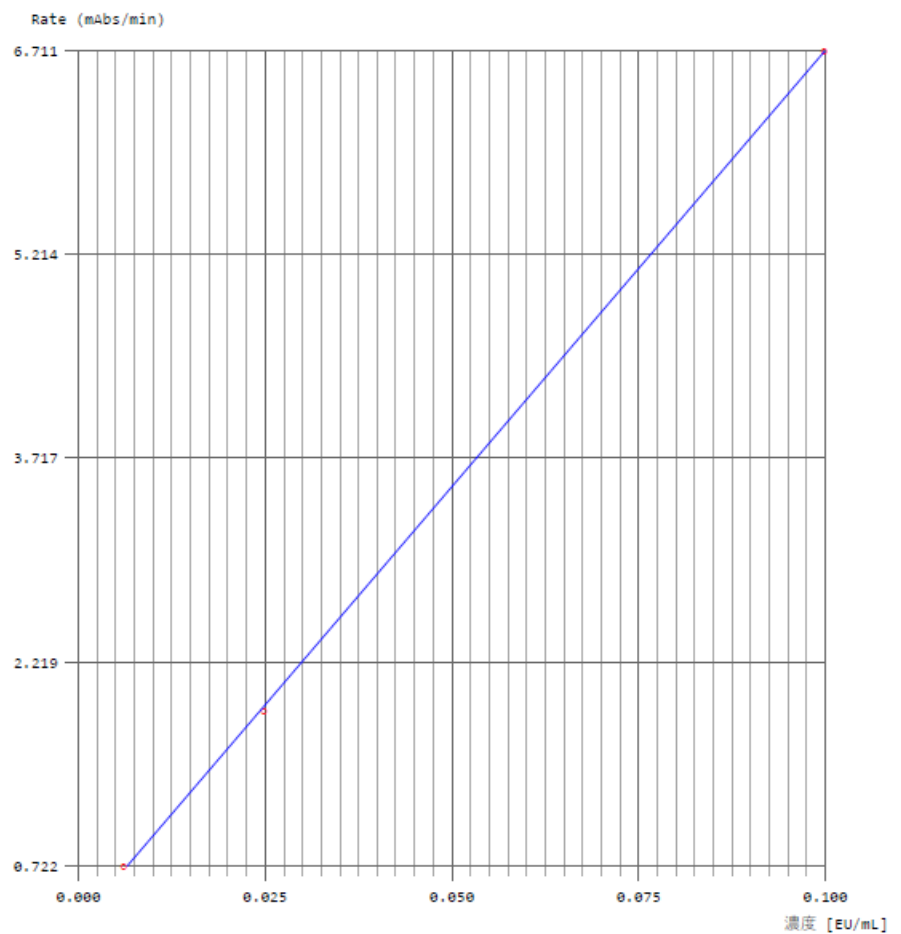

反応速度法
一次式
 $Y = AX + B$ X:Linear, Y:Linear
A = 64.06065 B = 0.29897
r = 0.99997 (通)

	濃度 [EU/mL]	Rate (mAbs/min)
St-01	0.00625	0.72240
St-02	0.025	1.87167
St-03	0.1	6.71079

お問い合わせ先

生化学工業株式会社 海外事業推進部 LALグループ

Tel. 03-5220-8953 Fax.03-5220-8956

E-mail: lal@seikagaku.co.jp

URL : <https://www.lalbiz.com>



生化学工業株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目6-1